

KU-100 NEU

Полировочное средство для пластмасс протезов

Polish for acrylic denture resins

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ONLY FOR DENTAL USE BY QUALIFIED PERSONNEL



D-74722 Buchen-Hettingen



Feguramed GmbH
Jahnstr. 2
74722 Buchen (Odenw.) Germany
Tel. +49 (0)6281/5227-0 -15
www.feguramed.com

MADE IN GERMANY

Информация о применении

Русский

Показания:

Полировочное средство для акриловых пластмасс протезов.

Обработка:

- Для достижения необычного результата полирования базисов Ваших протезов при помощи **KU 100 NEU**, мы рекомендуем после отделки протезов, обработать их **наждачной бумагой зернистости 240 µm либо 280 µm** или резиновыми полирами, соответствующими этой зернистости.
- Для предварительного полирования на полировочном моторе мы рекомендуем в 1. или 2. режиме работы применение черной щетины (средней жесткости) с 1-2-двойными прокладками из волокон рами (Ø 50 – 80 мм).
Без дополнительного количества полировочной пасты **KU 100 NEU** Вы достигните зеркального блеска, также полируя в 1. или 2. режиме работы с полировочными дисками из шерсти или из волокон рами (Ø 50 – 80 мм).
- Для полирования с **прямым наконечником** мы рекомендуем при числе оборотов вращения в минуту от **5.000 – 20.000** применять щетки средней жесткости или мягкие, козий ворс (Ø 15 – 21 мм).
Для получения зеркального блеска используйте полировочные диски из шерсти или из волокон рами (Ø 23 – 25 мм), также без **KU 100 NEU**.
- Очистка проводится в аппарате для **ультразвуковой очистки** (примерно при 45° - 50°C) в течение **1 – 2 минут**. Очистка паром также возможна.
- Для получения ярко выраженного зеркального блеска мы рекомендуем использовать **Protofix Polish Cream** (REF P8000).
Для **Protofix Polish Cream** существует отдельная инструкция по применению.



Хранение:

Хранить при температуре не выше 25 °C. Избегать попадания прямого солнечного света. После применения ёмкости следует всегда закрывать и хранить в недоступном для детей месте.

Продажная единица

REF

8078-200	KU-100 NEU	200 грамм
8078-400	KU-100 NEU	400 грамм

Instructions for use

English

Indication:


Polishing paste for acrylic denture resins.

Technique:

- In order to achieve an exceptional polishing result with **KU-100 NEU** and your dentures, we recommend the following working procedure:
Grind the dentures with a sandpaper (grain size **240 µm** or **280 µm**) or rubber polishers, which have a similar grain size.
- For pre-polishing at the dental lab lathe (1st or 2nd gear) we highly recommend brushes (Ø 50 – 80 mm) with multiple rows including black bristle (medium hardness) and cotton.

To get the high-lustre surface polish with cotton maps (also 1st or 2nd gear). Here it is not necessary to apply additional paste **KU-100 NEU**.
- In case of handpiece polishing we recommend:
Rotational speed of **5.000– 20.000 rpm** and the use of goat hair brushes (Ø 15 – 21 mm, soft or medium hardness).
For high-lustre polishing use cotton buffing wheels (Ø 23 – 25 mm). Here it is not necessary to apply additional paste **KU-100 NEU**.
- Cleaning is done in a ultrasonic unit (approx. 45° - 50°C) for **1 – 2 minutes**. In the same way cleaning with a steaming device is possible.
- For the ultimate super high-lustre polishing we highly recommend **Protofix Polish Cream** (REF P8000).

Please follow the instructions of **Protofix Polish Cream**.

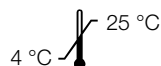

Storage:

Don't store above 25 °C. Keep away from sunlight. Keep locked up and out of reach of children. Keep container tightly closed.

Presentation:

REF

8078-200	KU-100 NEU	200 g
8078-400	KU-100 NEU	400 g