

PROTOFIX POLISH CREAM

Полировочный крем для ярко выраженного
зеркального блеска пластмасс протезов
Polish cream for super high-luster polishing of
acrylic denture resins

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ONLY FOR DENTAL USE BY QUALIFIED PERSONNEL



Feguramed GmbH
Jahnstr. 2
74722 Buchen (Odenw.) Germany
Te. +49 (0)6281/5227-0 -15
www.feguramed.com

MADE IN GERMANY

Информация о применении

Русский

Показания:

Полировочный крем для ярко выраженного зеркального блеска пластмасс протезов.

Обработка:

1. Для того, чтобы добиться ярко выраженного зеркального блеска для всех протезов верхней и нижней челюсти, а также для их базальных поверхностей после полировки с пастой **KU 100 NEU** (REF 8078), для каждого зубного техника является необходимостью применение крема **PROTOFIX POLISH CREAM**.
2. Для полирования на полировочном моторе мы рекомендуем в 1. режиме работы использовать щетки с прокладками из волокон рами (Ø 30 – 50 мм). Полировать до блеска следует легко, несильно надавливая.
Для того, чтобы достичь ярко выраженного зеркального блеска Вам следует использовать во 2. режиме работы полировочные круги из шерсти или из волокон рами без пасты **PROTOFIX POLISH CREAM**.
3. Для полирования с прямым наконечником мы рекомендуем на низком числе оборотов вращения использовать щетки средней жесткости, козий ворс (Ø 15 – 21 мм):
Для ярко выраженного зеркального блеска используйте полировочные круги из шерсти или из волокон рами (Ø 23 – 25 мм), также без пасты **PROTOFIX POLISH CREAM**.
4. Очистка проводится в аппарате для ультразвуковой очистки (примерно при 45 ° – 50 °C) в течение **1 – 2 минут**. Очистка паром также возможна.



Хранение:

Хранить при температуре не выше 25 °C. Избегать попадания прямого солнечного света. После применения ёмкости следует всегда закрывать и хранить в недоступном для детей месте.

Продажная единица

REF

P8000 PROTOFIX POLISH CREAM 100 граммовая ёмкость

Instructions for use


English

Indication:

Polish cream for super high-luster polishing of acrylic denture resins

Technique:

1. In order to achieve a super high-lustre surface on dentures after polishing with **KU 100 NEU** (REF 8078), the use of **PROTOFIX POLISH CREAM** is an absolute must for every dental technician.
2. In case of polishing at a dental lab lathe we highly recommend brushes (Ø 30 – 50 mm) with multiple rows including bristle (medium hardness) and cotton. And a low contact pressure.
To get a high-lustre surface polish with cotton maps (2nd gear). Here it is not necessary to apply additional cream **PROTOFIX POLISH CREAM**.
3. In case of handpiece polishing we recommend:
Low rotational speed and the use of goat hair brushes (Ø 15 – 21 mm, medium hardness).
For high-lustre polishing use cotton buffing wheels (Ø 23 – 25 mm). Here it is not necessary to apply additional cream **PROTOFIX POLISH CREAM**.
4. Cleaning is done in an ultrasonic unit (approx. 45° - 50°C) for **1 – 2 minutes**. In the same way cleaning with a steaming device is possible.

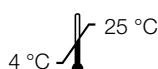

Storage:

Don't store above 25 °C. Keep away from sunlight. Keep locked up and out of reach of children. Keep container tightly closed.

Presentation:

REF

P8000 PROTOFIX POLISH CREAM 100g jar